































TRATAMIENTO ESTÉTICO FACIAL


Para elegir el Tratamiento Estético Facial correcto y obtener los resultados deseados, se deben considerar los 3 parámetros perfectos de la piel (Volumen, Textura y Tonalidad) y las causas del envejecimiento facial (Deterioro, Descendencia y Erosión).

El envejecimiento facial es un proceso inevitable que nos afecta a todos. Los signos visibles del envejecimiento están bien documentados y aparecerán a diferentes velocidades según nuestra genética única (predeterminada e inmutable), además de cualquier factor externo negativo que pueda influir en el proceso de envejecimiento (prevenible). El envejecimiento facial afecta a todos los tejidos del rostro (piel, grasa, músculo, hueso) y se debe a múltiples causas subyacentes. Para un valor estético óptimo, el triángulo estético debe tener su volumen en la parte superior y esto es lo que los médicos pretenden lograr para obtener el mejor resultado del tratamiento.

La piel perfecta es subjetiva y puede variar de una persona a otra según la etnia, el color, el sexo y la edad. La tonalidad y la textura son aspectos clave siendo visualmente importantes. La textura debe ser suave e incluso sin marcas, fisuras o grietas, la tonalidad debe ser vibrante y brillante.

Tras la consulta, cuando el médico ha analizado todos los parámetros de envejecimiento y de la piel, se puede tomar una decisión sobre la elección del producto más adecuado para el tratamiento estético perfecto.

Al elegir el producto adecuado, logrará los resultados deseados duraderos. El uso de un producto altamente controlado, probado profesionalmente, sin residuos tóxicos y producido con los estándares más estrictos es lo que los pacientes esperan que brinden los mejores médicos.

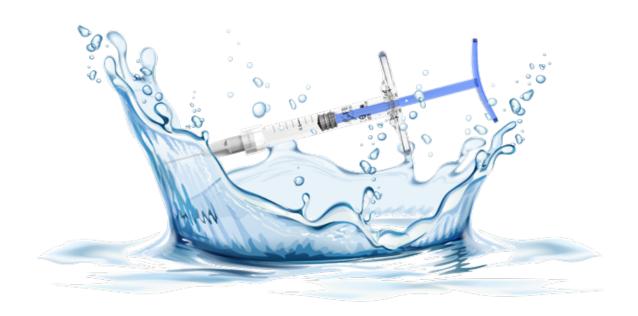











INNOVACIÓN CIENTÍFICA

El ácido hialurónico reticulado se combina con miles de moléculas de agua expandiéndose y creando volumen donde se inyecta suavizando las arrugas, depresiones de la piel y cicatrices. Al mismo tiempo, hidrata las células alrededor del sitio de aplicación dando un estado vibrante y saludable.

My Filler fue creado y desarrollado en uno de los laboratorios y centros de investigación más modernos por un equipo altamente cualificado. My Filler utiliza un protocolo de producción muy seguro donde los residuos de impurezas están prácticamente ausentes. Todas las etapas de producción se realizan en un ambiente estéril que garantiza un producto final puro.


Los productos My Filler se basan en la tecnología TRIO, en la que se combinan un peso molecular específico de HA a diferentes tasas de reticulación de BDDE y diferentes concentraciones de ácido hialurónico en un entorno de producción especial y procedimientos de fabricación específicos para cada tipo de relleno dérmico.

Esta fórmulación compleja se puede utilizar para crear todos los resultados estéticos faciales deseados.





SOFT

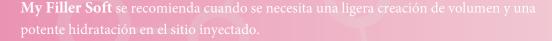

Profundidad de inyección recomendada: la dermis superficial.

Recomendado para: Zonas como la región periorbitaria, eliminando la oscuridad debajo de los ojos, o perioral, eliminando las arrugas de la epidermis queratinizada (código de barras), labios naturales e hidratación.

My Filler Soft también se utiliza para potenciar y mantener un cutis vibrante y evitar que las arrugas vuelvan a aparecer.

My Filler Soft es muy fluido, por lo que su uso con técnicas de Mesoterapia también es adecuado.



Técnica de inyección sugerida:




Producido con la **tecnología TRIO**, tiene la concentración de HA más pequeña de la gama **My Filler**, solo 20 mg/ml. Tiene una viscosidad muy baja, por lo que es extremadamente fácil de inyectar con una aguja de 27G o 30G.

Áreas de Inyección Sugerida:



Microgotas



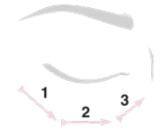



Código	Concentración de HA	Tipo HA	Agente reticulación	Ratio reticulación	Tamaño partícula
MYF001	20 mg/ml	Monofásico	BDDE	1,5	80

El envase My Filler Soft contiene: 1 jeringa precargada estéril de 1 ml, 2 agujas 27G 1/2", 2 etiquetas de producto, 1 folleto de instrucciones multilingüe, 1 tarjeta de paciente.



MEDIUM

My Filler Medium es el producto más popular de la familia My Filler gracias a sus propiedades de aplicación general. Usando Medium, se creará un volumen de tamaño medio y una hidratación enérgica en el sitio inyectado.

Profundidad de inyección recomendada: la dermis media.

Recomendado para: Sitios como pliegues nasolabiales, mentolabial (líneas de marioneta), glabela (líneas del entrecejo) y aumento de labios.




My Filler Medium es muy suave de inyectar gracias a la jeringa ergonómica, el pistón cómodo, el émbolo seguro y la viscosidad media.

El material se asienta perfectamente en el sitio de inyección deseado y es muy duradero y estable una vez inyectado.




Producido con la **tecnología TRIO**, tiene una concentración de 25 mg/ml de HA monofásico. Tiene una viscosidad media apta para inyección con aguja o cánula de 27G. Varias técnicas son adecuadas con el relleno **My Filler Medium**, como líneas, puntos o sombreado cruzado.

Áreas de Inyección Sugerida:

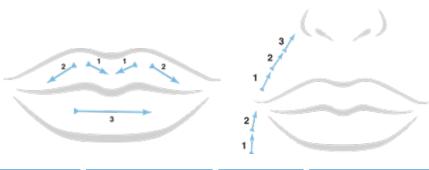

Técnica de Inyección Sugerida:

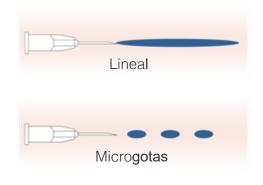

Suggested Injection Needle:

27G Cannula

Codigo	Concentración de HA	Tipo HA	Agente Reticulación	Ratio reticulación	Tamaño partícula
MYF002	25 mg/ml	Monofásico	BDDE	2,5	100

El envase My Filler Medium contiene: 1 jeringa precargada estéril de 1 ml, 2 agujas 27G 1/2", 2 etiquetas de producto, 1 folleto de instrucciones multilingüe, 1 tarjeta de paciente.



STRONG

My Filler Strong es una obra de arte... Se recomienda específicamente para la corrección de gran volumen asociada con el contorno facial.

Profundidad de inyección recomendada: desde la dermis profunda hasta el periostio.

Recomendada para: mejillas, mentón, nariz, mandíbula y cara media.

My Filler Strong tiene una alta viscosidad y grandes propiedades de moldeabilidad. Una vez inyectado en el sitio deseado, el material permanece donde está implantado evitando migraciones inesperadas a otras partes de la cara.

My Filler Strong se puede usar con cánula o una variedad de calibres de aguja de 27G a 25G.



Técnica de Inyección Sugerida:

Lineal, Microgotas



My Filler Strong es único en su tipo. Producido con la tecnología TRIO, tiene una concentración excepcional de HA de 30 mg/ml. Tiene una viscosidad muy alta pero tiene la capacidad de pasar fácilmente a través de agujas y cánulas: 25G, 26G y 27G.



Áreas de Inyección Sugerida:

Aguja de Inyección Sugerida:

25G - 27G

Cannula







Código	Concentración HA	Tipo HA	Agente reticulación	Ratio reticulación	Tamaño partícula
MYF003	30 mg/ml	Monofásico	BDDE	3,5	140

El envase My Filler Strong contiene: 1 jeringa precargada estéril de 1 ml, 2 agujas 27G 1/2", 2 etiquetas de producto, 1 folleto de instrucciones multilingüe, 1 tarjeta de paciente.















RESULTADOS INMEDIATOS Y DURADEROS

Una nueva tecnología desarrollada por el equipo **My Med** resuelve un problema recurrente de los pacientes:

- El deseo de resultados inmediatos.

Es bien sabido que los fillers estándar tardan en lograr el resultado final. La razón detrás de esto es que el material reticulado de HA necesita un tiempo para asentarse y conectarse con las partículas de agua. Este proceso puede tardar de 5 a 7 días dependiendo de varios factores biológicos del paciente. Los beneficios del proceso de reticulado significan que los resultados serán duraderos.

Los fillers no reticulados (también conocidos como biorrevitalizadores o potenciadores de la piel) tienen una vida útil muy corta después de la inyección debido a la rápida degradación por la hialuronidasa natural del cuerpo. Su acción es conectar inmediatamente con el agua dando una tez vibrante y luminosa. Desafortunadamente, después de 5 a 7 días, el material desaparece por completo.

El equipo **My Med** creó la **tecnología DUAL Link...** una fórmula especial que aprovecha ambas tecnologías de reticulado y no reticulado para brindarles a los médicos y pacientes el beneficio óptimo de ambos en un producto increíble.

La línea especial de fillers que utilizan la **tecnología DUAL Link** brindará un efecto instantáneo debido a la no reticulación y un resultado de larga duración gracias a la reticulación, lo que garantiza que los pacientes estén satisfechos con sus resultados inmediatos y ahorra tiempo al médico al evitar la necesidad de retogues.






Te presentamos My Filler HA Refill...


residuos tóxicos.




Técnica de Invección Sugerida:

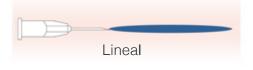

Producido con la tecnología DUAL Link, My Filler HA Refill tiene una concentración de 18 mg/ml de HA monofásico reticulado y 2 mg/ml de HA monofásico no reticulado. Tiene una viscosidad muy baja apta para inyección con aguja 27G o 30G o Hyaluron Pen.

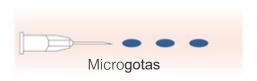

Aguja de Inyección Sugerida:

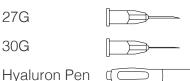





Código	Concentración HA	Tipo HA	Agente reticulación	Ratio reticulación	Tamaño partícula
MYF107	18 + 2 mg/ml	Monofásico	BDDE	1,5	80

El envase My Filler HA Refill contiene: 1 jeringa precargada estéril de 1 ml, 2 agujas 27G 1/2", 2 etiquetas de producto, 1 folleto de instrucciones multilingüe, 1 tarjeta de paciente.



GLIPS


My Filler Glips es el primer producto de la gama **My Filler** completamente dedicado y fabricado exclusivamente para tratamientos de labios, tales como volumen y contorno.

My Filler Glips tiene una formulación especial creada teniendo en cuenta una variedad de diferencias: biológicas, estructurales, de color, forma y volumen. Su finalidad es dar una solución inmediata y a largo plazo, cumpliendo los deseos y expectativas del paciente.






Producido con la **tecnología DUAL Link**, tiene una concentración de 20 mg/ml de HA monofásico reticulado y 5 mg/ml de HA monofásico no reticulado. Tiene una viscosidad media apta para inyección con aguja o cánula de 27G. Varias técnicas de inyección son adecuadas con **My Filler Glips**, como la técnica lineal o de puntos.

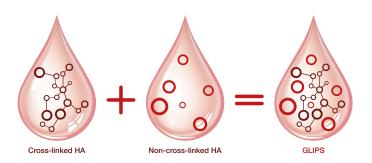

Técnica de Inyección Sugerida:

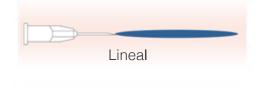




Suggested Injection Needle:

27G Cannula

Código	Concentración HA	Tipo HA	Agente reticulación	Ratio reticulación	Tamaño partícula
MYF105	20 + 5 mg/ml	Monofásico	BDDE	2	100

El envase My Filler Glips contiene: 1 jeringa precargada estéril de 1 ml, 2 agujas 27G 1/2", 2 etiquetas de producto, 1 folleto de instrucciones multilingüe, 1 tarjeta de paciente.

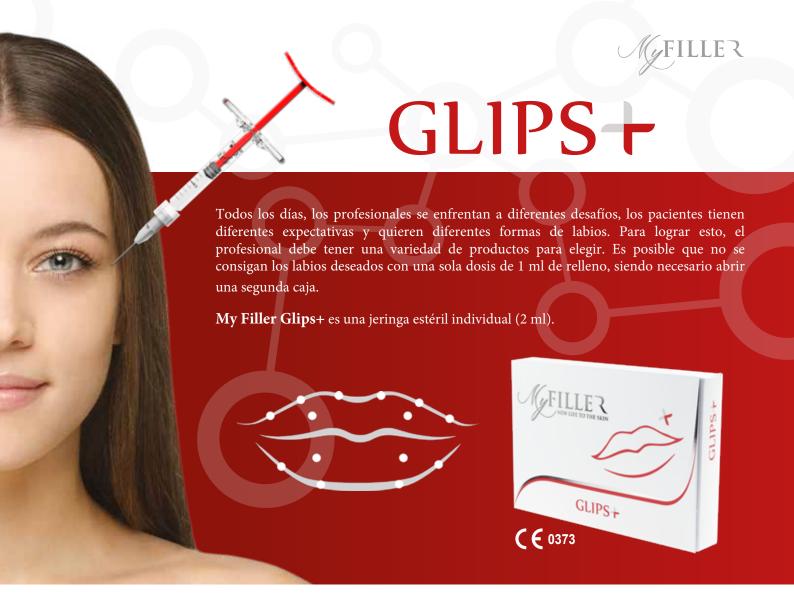

Al ofrecer una alternativa con una dosis más alta de HA en una sola jeringa/caja estéril, esperamos ahorrar en material de envasado, costes de transporte, espacio de almacenamiento y material de desecho, lo que hace que **My Filler Glips+** sea más amigable con el medio ambiente sin comprometer el resultado final que merece cada paciente de **My Filler.**

Hoy en día existen varias técnicas de inyección de relleno y varias formas de labios.



My Filler Glips+ garantiza que el médico que trabaja con un producto de tan alta calidad en una dosis mayor puede lograr resultados perfectos con una mayor satisfacción del paciente.

Código	Concentración HA	Tipo HA	Agente reticulación	Ratio reticulación	Tamaño partícula
MYF106	20 + 5 mg/ml	Monofásico	BDDE	2	100

El envase My Filler Glips+ contiene: 1 jeringa precargada estéril de 2 ml, 2 agujas 27G 1/2", 2 etiquetas de producto, 1 folleto de instrucciones multilingüe, 1 tarjeta de paciente.



My Filler Man Max es una formulación especial creada teniendo en cuenta las diferencias biológicas y estructurales entre la piel del hombre y de la mujer.

Además de tener vello facial, existen diferencias estructurales entre la piel del hombre y la piel de la mujer. Grosor de la piel: la piel masculina es aproximadamente un 25% más gruesa. La densidad de colágeno en la piel masculina es mayor. La textura de la piel en los hombres es más dura y áspera.








Lineal, Microgotas



Producido con la **tecnología DUAL Link, My Filler Man Max** tiene una concentración de 25 mg/ml de AH monofásico reticulado y 5 mg/ml de AH monofásico no reticulado. Tiene una alta viscosidad apta para inyección con aguja o cánula de 25G, 26G y 27G. Varias técnicas de inyección son adecuadas con **My Filler Man Max,** como técnica lineal, de puntos, de abanico o de sombreado cruzado.

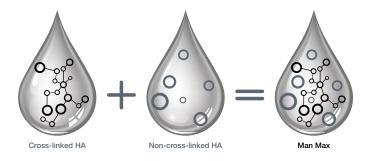

Agu	a s	Su	ae	rid	a:
лчи	a .	Ju	чс	ΙIU	a.

Código	Concentración HA	Tipo HA	Agente reticulación	Tasa reticulación	Tamaño partícula
MYF004	25 + 5 mg/ml	Monofásico	BDDE	3	120

El pack My Filler Man Max contiene: 1 jeringa precargada estéril de 1 ml, 2 agujas 27G 1/2", 2 etiquetas de producto, 1 folleto de instrucciones multilingüe, 1 tarjeta de paciente.



INSTRUMENTOS DE MARKETING

Certificado Curso (MYF050)



Bolsa de hielo de Glips (MYF171)





Mi lapiz de Fillers derma (MYF170)








APP MOVIL

My Filler App PRO le permite tomar fotografías de "Antes" y "Después" junto con recomendaciones posteriores al tratamiento.

Una aplicación fácil de usar que registra toda la información de su paciente, establece recordatorios cuando deben recibir más tratamiento y comparte rápidamente sus fotos con ellos.

Los médicos pueden imprimir fácilmente formularios de consentimiento del paciente desde la aplicación.




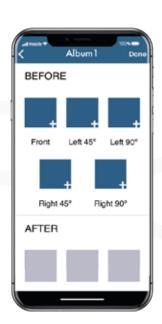







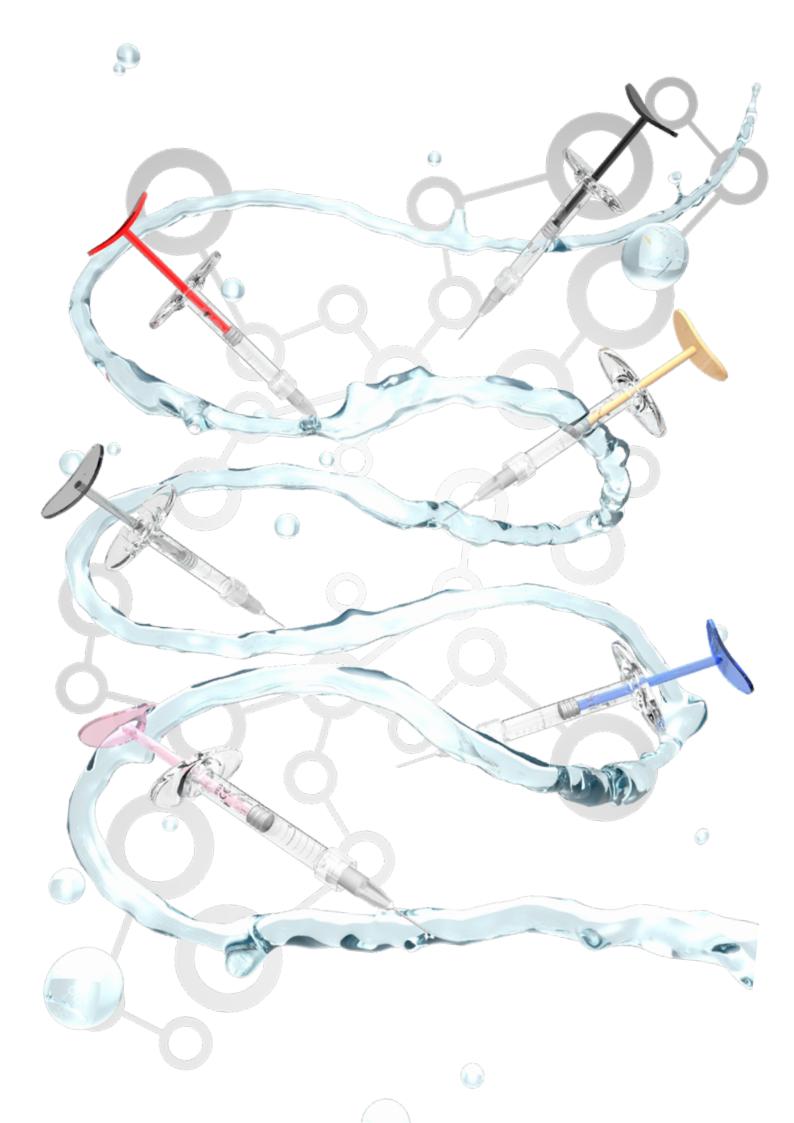



Vendel utca, 11 1096 Budapest - Hungary Tel. +36 70 389 5841 www.my-med.eu info@my-med.eu



Avda. Las Torres N°96 L-4. 50008 Zaragoza (España) T: (+34) 976 258970 info@imbiodent.com www.imbiodent.com

Distribuido por:

