


## PARASORB RESODONT® PARASORB RESODONT® Forte



- Cubrimiento y protección del material de aumento en el área de regeneración guiada de tejidos (GTR) y regeneración ósea guiada (GBR), elevación sinusal, protección de la membrana Schneiderian.

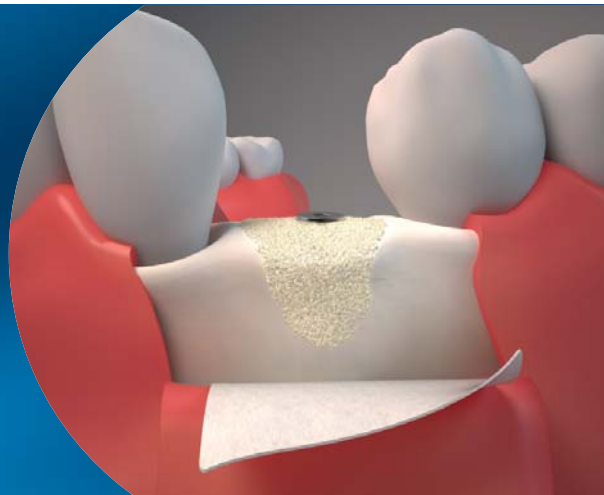

### PARASORB RESODONT®

1 cm<sup>2</sup> contiene 2.8 mg de fibras nativas de colágeno equino.

### PARASORB RESODONT® Forte

1 cm<sup>2</sup> contiene 6 - 8 mg de fibras nativas de colágeno equino.

PARASORB RESODONT® Forte ofrece una duración prolongada de la función de barrera. Muy alta resistencia al desgarro y estabilidad mecánica.

### Características del producto: membrana de colágeno reabsorbible


- sin reticulación química
- rápido y fácil de cortar y de aplicar, se puede utilizar por ambos lados.
- Rápida integración en el tejido circundante
- biocompatibilidad excelente
- resistente al desgarro y fácil de suturar

Recubrimiento del área del aumento  
PARASORB RESODONT® Forte

Dr. Claude Andreoni, Dr. Thomas Meier,  
Zurich, Switzerland



## PARASORB Sombrero®

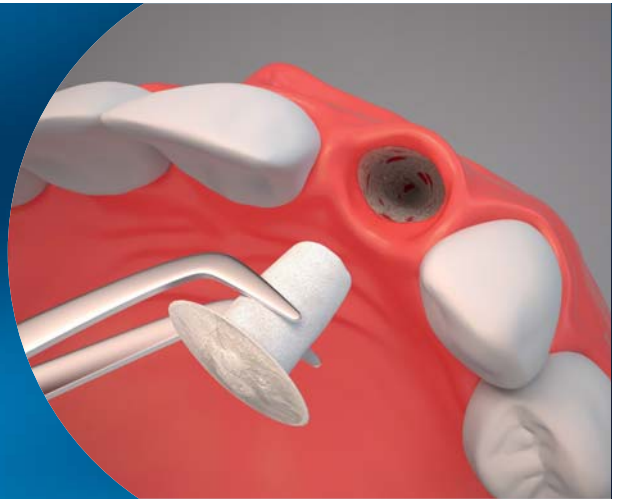

### Membrana-Cono

→ Para cubrir y llenar simultáneamente el alveólo en el área estética anterior (alveólo post-extracción sin defecto óseo)



PARASORB Sombrero® - una combinación única de membrana y cono de colágeno

### Parte membrana

La parte de membrana de colágeno impide el crecimiento interno de los tejidos blandos. Permite la curación abierta

### Parte cono

La parte de cono de colágeno estabiliza el coágulo, ofreciendo una matriz estable para la nueva formación de colágeno y subsecuentemente para la formación de hueso nuevo

## Preservación de alveólos con PARASORB Sombrero®

Juraj Brozović DMD, PhD  
Split, Croatia



Alveólo post-extracción sin defecto óseo



Adaptación del PARASORB Sombrero®




Inserción en el alveólo post-extracción y colocación-ajuste de la membrana por debajo de la mucosa



PARASORB Sombrero® asegurado con un punto cruzado de sutura RESOTEX® ORAL 6/0 with ART 13mm "aguja negra"

# COLAGENOS & COLAGENOS con protección antibiótica

PARASORB® Fleece  
PARASORB® Fleece HD  
PARASORB® Fleece Genta HD

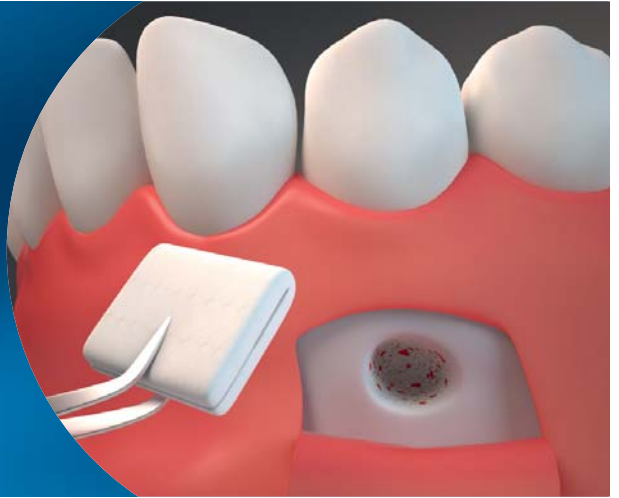

→ Recubrimiento absorbible de heridas, tamponamiento, hemostático, llenado del defecto óseo en quistes y otros defectos con las 4 paredes, recubrimiento del sitio donante después de un injerto de tejido blando o duro



PARASORB® Fleece  
1 cm<sup>2</sup> contiene 2.8 mg de fibras nativas de colágeno equino.

PARASORB® Fleece HD colágeno altamente concentrado para grandes defectos óseos. 1 cm<sup>2</sup> contiene 5.6 mg de fibras nativas de colágeno equino.

PARASORB® Fleece Genta HD con protección antibiótica  
1 esponja de colágeno con gentamicina de 2.5 x 2.5 x 0.5 cm contiene 35 mg de fibras nativas de colágeno equino.

25 mg de sulfato de gentamicina equivale a 13.82 - 17.88 mg de gentamicina

## Características de los productos Fleece y Cone

- Capacidad de absorción de grandes cantidades de fluidos debido a su estructura esponjosa.
- rápida integración en el tejido circundante
- hemostasis rápida y segura
- estabilización del coágulo

PARASORB® Cone  
PARASORB® Cone Genta



→ Tamponamiento, hemostático, tratamiento de los alveólos post-extracción sin defectos óseos en el área posterior.


PARASORB® Cone Genta con protección antibiótica  
1 cono de colágeno-gentamicina contiene 22.4 mg de fibras nativas de colágeno equino. 16 mg de sulfato de gentamicina contiene 8.80 - 11.44 mg de gentamicina


PARASORB® Cone  
1 cono de colágeno contiene 22.4 mg de fibras nativas de colágeno equino.



# PARASORB® GAMA DE PRODUCTOS

## RESORBA® Colágenos dentales indicaciones & recomendación de producto

Producto	REF	Tamaño	Piezas/envase	
<b>GBR &amp; GTR Indicaciones</b>				
<b>Membranas de colágeno reabsorbibles</b>				
PARASORB RESODONT® Forte	RDF1502	16 x 25 mm	1 membrana	
	RDF2502	22 x 25 mm	1 membrana	
	RDF3503	32 x 25 mm	1 membrana	
	RDF0703	64 x 25 mm	1 membrana	

<b>Elevaciones de seno - protección de la membrana de Schneiderian, (GBR &amp; GTR)</b>				
<b>Membranas de colágeno reabsorbibles</b>				
PARASORB RESODONT®	RD2502	22 x 25 mm	1 membrana	
	RD3503	32 x 25 mm	1 membrana	
	RD0703	64 x 25 mm	1 membrana	

<b>Preservación de alveólos post-extracción en la zona estética ( alveólos sin defecto óseo)</b>				
<b>Membrana-Cone reabsorbible</b>				
PARASORB Sombrero®	RD0001	membrana: Ø 18 mm cono: Ø 12 mm altura: 16 mm	1 membrana-cono	

Producto	REF	Tamaño	Contenido/envase	
<b>Tratamiento de defectos óseo (quistes, resección de raíces, sitios donantes), Cubrimiento de heridas, tamponamiento, hemostasia</b>				
<b>Fleeces &amp; Cones reabsorbibles</b>				
PARASORB® Fleece HD*	DK8001	70 x 30 mm	5 fleeces	
PARASORB® Fleece	DK1836	18 x 36 mm	12 fleeces	
	DK9001	70 x 30 mm	5 fleeces	
PARASORB® Cone	DK1010	cono: Ø 12 mm altura: 16 mm	10 conos	
<b>Cones y Fleeces reabsorbibles con protección antibiótica</b>				
RESORBA® Fleece Genta HD*	MK25	25 x 25 mm	5 fleeces	
GENTA-COLL® resorb	GC55	50 x 50 mm	5 fleeces	
PARASORB® Cone Genta	MK11	cono: Ø 12 mm height: 16 mm	5 conos ensasado individual	
	MK10	cono: Ø 12 mm altura: 16 mm	10 conos	

\* HD (alta concentración de colágeno)



Distribuidor exclusivo para España:

**Imbiodent SL**

Avda. de las Torres Nº96 L-4

50008 Zaragoza (España)

Tel (+34) 976 258 970

Fax (+34) 976 258 082

info@imbiodent.com

www.imbiodent.com